


Smart weegschaal

HN300T2 Intelli IT (HN-300T2-EBK / HN-300T2-EGY)

Gebruikershandleiding

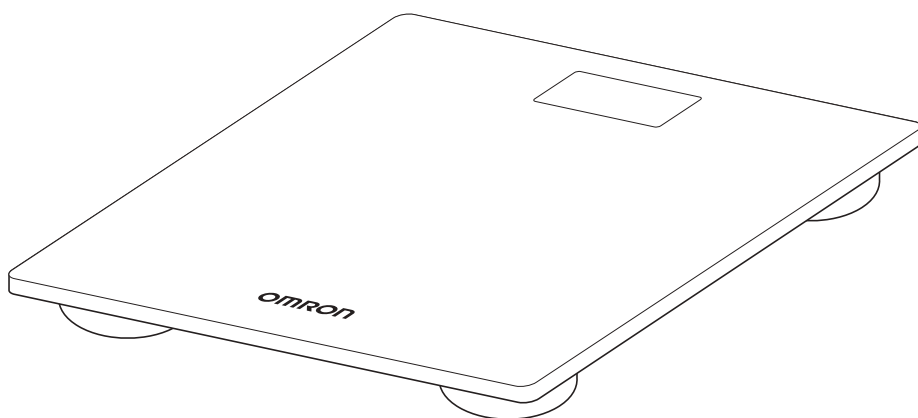

WEBIM-HN-300T2-E-NL-01-06/2021

5670959-7A

Datum van uitgifte: 2021-07-16

Inhoudsopgave

Inleiding	2
Belangrijke veiligheidsinformatie	3
Ken uw apparaat	5
Voordat u een meting verricht	7
Een meting verrichten	9
Uw meting overdragen.....	10
Gewichtsvoortgang van meerdere gebruikers traceren.....	11
De standaardinstellingen herstellen	12
Foutmeldingen en problemen oplossen	13
Onderhoud.....	14
Kalibratie	14
Specificaties	15
Correcte verwijdering van dit product (elektrische en elektronische afvalapparatuur).....	16
Begeleiding en verklaring van de fabrikant	16

Inleiding

Hartelijk dank dat u de OMRON Smart weegschaal HN300T2 Intelli IT hebt aangeschaft. Dit product is hoofdzakelijk bedoeld voor algemeen huishoudelijk gebruik.

Veiligheidsaanwijzingen

In deze gebruiksaanwijzing vindt u belangrijke informatie over dit product. Om de veilige en juiste werking van dit product te garanderen, verzoeken wij u deze aanwijzingen te LEZEN en te BEGRIJPEN. **Als u deze aanwijzingen niet begrijpt of vragen hebt, neemt u contact op met uw OMRON-winkel of -distributeur voordat u probeert dit product te gebruiken. Raadpleeg uw arts voor specifieke informatie over uw eigen gewicht.**

Beoogd gebruik

De OMRON Smart weegschaal HN300T2 Intelli IT is bedoeld voor de meting en weergave van lichaamsgewicht. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik.

Ontvangst en inspectie

Haal dit product en andere onderdelen uit de verpakking en inspecteer op eventuele schade. Als dit product of andere onderdelen beschadigd zijn, GEBRUIK DEZE DAN NIET en raadpleeg uw OMRON-winkel of distributeur.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees de belangrijke veiligheidsinformatie in deze gebruiksaanwijzing voordat u dit apparaat gebruikt. Volg deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor uw veiligheid.

Waarschuwing

Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, wanneer deze niet wordt vermeden, kan leiden tot de dood of tot ernstig letsel.

- Raadpleeg uw arts of zorgverlener voordat u begint aan een afslank- of trainingsprogramma.
- Gebruik de weegschaal niet meer en raadpleeg uw arts als u last hebt van huidirritatie op uw voet of voeten.
- Gebruik de weegschaal NIET op gladde oppervlakken, zoals een natte vloer.
- Bewaar de weegschaal buiten het bereik van baby's, peuters en kinderen.
- Spring NIET op de weegschaal. Als u dit wel doet, kunt u vallen of uitglijden en ernstig letsel oplopen.
- Gebruik de weegschaal NIET wanneer uw lichaam en/of voeten nat zijn, bijvoorbeeld na een bad of douche.
- Ga NIET op de randen of het displaygebied van de weegschaal staan; u zou uw evenwicht kunnen verliezen en vallen waardoor u ernstig letsel kunt oplopen.
- Personen met beperkingen of fysiek kwetsbare personen dienen door een andere persoon te worden geholpen wanneer ze deze weegschaal willen gebruiken, om te voorkomen dat ze vallen bij het op- en afstappen van de weegschaal.
- Steek uw vingers NIET in een van de openingen of in de weegschaal.
- Gebruik de weegschaal binnenshuis.
- Gebruik de weegschaal NIET voor andere doeleinden dan in deze gebruiksaanwijzing beschreven.
- Gebruik de weegschaal NIET tegelijkertijd met andere medische elektrische (ME) apparatuur. Dit kan een onjuiste werking van de apparaten en/of een onnauwkeurig meetresultaat tot gevolg hebben.
- Beschadig het glas NIET. Het glas zou kunnen breken en u zou ernstig letsel kunnen oplopen.

Gebruik van de batterijen

- Als er batterijvloeistof lekt en in uw ogen of op uw huid of kleding terechtkomt, spoel dan onmiddellijk met een ruime hoeveelheid schoon water. Neem contact op met uw arts als er batterijvloeistof in uw ogen of op uw huid is terechtgekomen.

Gegevensoverdracht

- Dit product zendt radiogolven (RF) uit op de 2,4 GHz-band. Gebruik dit product NIET op locaties waar radiogolven beperkt zijn, zoals in vliegtuigen en ziekenhuizen.

Let op

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan leiden tot licht tot matig letsel bij de gebruiker of patiënt of tot schade aan de apparatuur of aan andere eigendommen.

- Reinig de weegschaal voor gebruik als deze is gebruikt door mensen met een huidziekte op hun voeten.
- Plaats de weegschaal NIET tegen een muur, omdat hierdoor letsel kan ontstaan of een storing in de weegschaal kan optreden.
- Probeer de weegschaal NIET te demonteren, wijzigen of repareren.
- Plaats de weegschaal NIET op een zacht vloeroppervlak, zoals een tapijt of mat. De meting is hierdoor mogelijk niet accuraat.
- Dompel de weegschaal of een van de onderdelen NIET onder in water.
- Plaats de weegschaal NIET vlak bij een hittebron of onder een airconditioner.
- Voorkom blootstelling aan direct zonlicht.
- Voorkom dat deze weegschaal wordt blootgesteld aan excessieve impact, trillingen en grote schokken.
- Was de weegschaal NIET met water.
- Veeg de weegschaal NIET af met benzeen, benzine, verfverdunder of andere vluchtige oplosmiddelen.
- Plaats de weegschaal NIET op een plek waar deze wordt blootgesteld aan chemicaliën of bijtende dampen.
- Bewaar de weegschaal op een effen oppervlak.
- Plaats GEEN voorwerpen op de weegschaal.

Gebruik van de batterijen

- Vervang lege batterijen onmiddellijk door nieuwe.
- Stel de batterijen NIET bloot aan vlammen of vuur.
- Plaats de batterijen NIET met de polen in de verkeerde richting.
- Gebruik ALLEEN 4 "AAA" mangaan- of alkalinebatterijen voor de weegschaal. Gebruik GEEN ander type batterijen. Gebruik GEEN oude en nieuwe batterijen tegelijk. Vervang alle 4 batterijen tegelijk.
- Gebruik GEEN verschillende typen batterijen tegelijk.
- Verwijder apparaat, batterijen en onderdelen volgens de van toepassing zijnde lokale regelgeving. Onrechtmatige verwijdering kan leiden tot milieuvervuiling.
- Verwijder de batterijen als de weegschaal 3 maanden of langer niet gebruikt zal worden.
- Gebruik de batterijen NIET na de vervaldatum.
- Zorg er tijdens de meting voor dat er geen mobiele apparaten of andere elektrische apparaten elektromagnetische velden uitzenden binnen 30 cm van de weegschaal. Dit kan een onjuiste werking van de weegschaal en/of een onnauwkeurig meetresultaat tot gevolg hebben.

Gegevensoverdracht

- Vervang de batterij NIET terwijl uw meetresultaten worden overgedragen naar uw smart device. Dit kan leiden tot incorrecte werking van de weegschaal en een mislukte overdracht van uw meetresultaat.
- Plaats GEEN chipkaarten, magneten, metalen objecten of andere apparaten die elektromagnetische velden afgeven vlak bij de weegschaal terwijl uw meetresultaten worden overgedragen naar uw smart device. Dit kan leiden tot incorrecte werking van de weegschaal en een mislukte overdracht van uw meetresultaat.

Ken uw apparaat


Inhoud van de verpakking



Weegschaal



4 "AAA" mangaanbatterijen

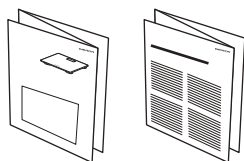

Gebruiksaanwijzing

App-gebruiksaanwijzing (De gewichtsvoortgang van meerdere gebruikers traceren)




Bewijs van beperkte garantie


Productoverzicht

Hoofdeenheid:


Voorkant

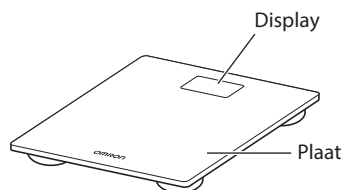

Achterkant

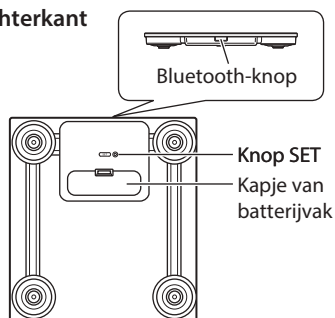

Display:

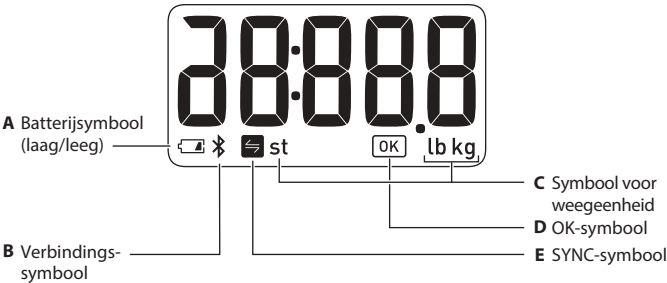


Weergavesymbolen

A		Knippert wanneer batterijen bijna leeg zijn.
		Wordt weergegeven wanneer de batterijen leeg zijn.
B		Knippert/wordt weergegeven wanneer de weegschaal wordt verbonden met uw smart device, er metingen worden overgedragen of wanneer de standaardinstellingen van de weegschaal worden hersteld.
C	st lb kg	Knippert/wordt weergegeven tijdens de selectie van de weegeenheid en wordt weergegeven tijdens uw meting.
D		Knippert wanneer de weegschaal is verbonden met uw smart device of wanneer de meting correct is overgedragen.
E		Wordt weergegeven als uw meting niet correct is overgedragen terwijl de weegschaal met uw smart device gekoppeld was.


Voordat u een meting verricht

1. Batterijen plaatsen

- 1 **Open het kapje van het batterijvak aan de achterkant van de weegschaal.**

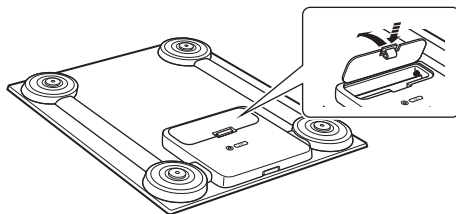

- 2 **Plaats de batterijen met de polen in de juiste positie, zoals rechts en binnen in het batterijvak aangegeven.**

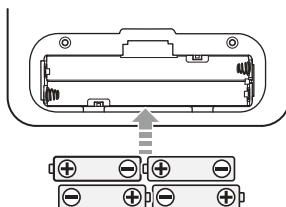

- 3 **Sluit het kapje van het batterijvak.**


Opmerking

- Plaats de weegschaal onmiddellijk na plaatsing van de batterijen op een harde, vlakke en effen vloer. De weegschaal wordt automatisch gekalibreerd.
- Wanneer het symbool " " en "A1" wordt weergegeven, vervangt u alle 4 batterijen door nieuwe. Items die in het geheugen zijn opgeslagen blijven bewaard als de batterijen worden verwijderd.
- Verwijdering van gebruikte batterijen dient plaats te vinden overeenkomstig uw lokale regelgeving hiervoor.

2. Weegeenheid selecteren

- 1 **Wanneer de weegschaal is uitgeschakeld, drukt u op de knop [SET] (Instellen) om uw gewenste weegeenheid te selecteren: "kg", "lb" of "st".**


Gewicht is standaard ingesteld op "kg".
De weegeenheid wordt na 10 seconden opgeslagen.
De weegschaal schakelt na 3 seconden automatisch uit.

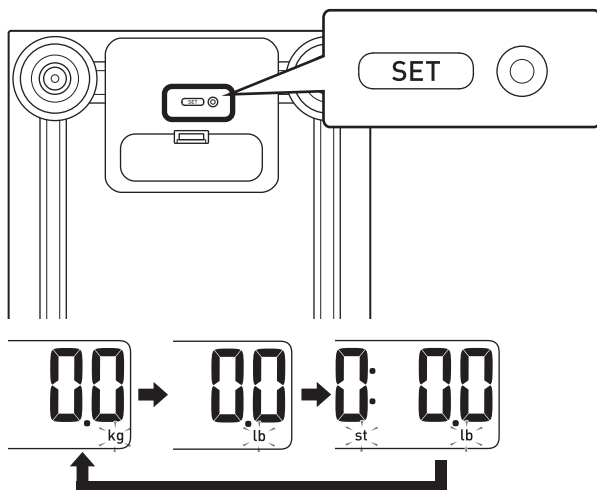

3. De weegschaal koppelen met een smart device

Wanneer u de meting wilt overdragen, volgt u de instructies hieronder. Deze weegschaal kan worden gekoppeld aan 2 smart devices; 2 mensen kunnen de meetgegevens beheren.

- 1 **Schakel Bluetooth in op uw smart device.**

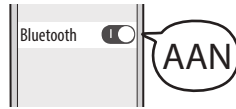

- 2 **Download en installeer de app "OMRON connect" op uw smart device.**

Als u de app "OMRON connect" al eerder hebt gebruikt en een account hebt gemaakt, opent u de app en voegt u uw nieuwe weegschaal toe.




- 3 **Open de app en volg de koppelingsaanwijzingen op uw smart device.**

Controleer of uw weegschaal zich binnen 5 m van uw smart device bevindt.



- 4 **Houd de knop [Bluetooth] (zijkant van de weegschaal) langer dan 2 seconden ingedrukt.**

De symbolen "Bluetooth" en "P" knipperen op het display.

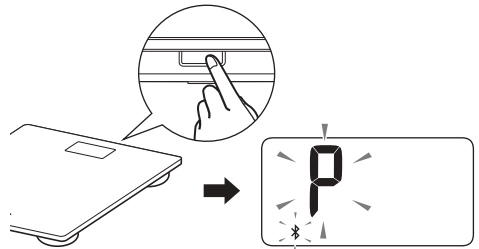

- 5 **Controleer of de weegschaal is verbonden.**

Wanneer de weegschaal is verbonden met uw smart device, knippert het symbool "OK".



Opmerking

- Wanneer "Err" wordt weergegeven, volgt u de instructies in de app.
- De weegschaal schakelt na 10 seconden automatisch uit.
- Houd er rekening mee dat OMRON niet verantwoordelijk is voor het verlies van gegevens en/of informatie in de app.
- Deze weegschaal kan de informatie van maximaal 2 koppelingen opslaan.
- "OMRON connect" is de enige app die we voor een juiste overdracht van de gegevens adviseren te gebruiken in combinatie met uw weegschaal.




Een meting verrichten

Het wordt aanbevolen om ter consistentie uw gewicht elke dag op hetzelfde tijdstip te meten.

1 Plaats de weegschaal op een harde, vlakke en effen vloer.

Opmerking

- Plaats de weegschaal niet op een dempend vloerooppervlak, zoals een tapijt of een mat.

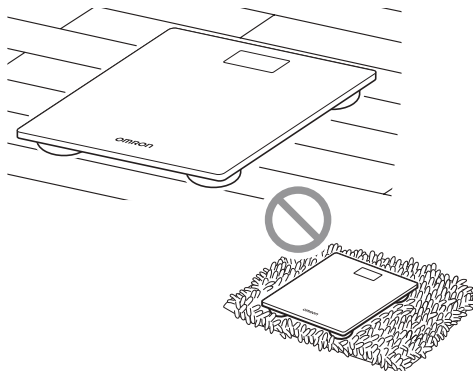

2 Stap op de weegschaal als deze is uitgeschakeld en voer een meting uit.

De stroom wordt automatisch ingeschakeld en de meting zal beginnen.
Blijf tijdens uw meting stilstaan.



3 Wanneer uw gewichtswaergave knippert, is uw meting voltooid.



4 Stap van de weegschaal af.

De weegschaal schakelt na 10 seconden automatisch uit.
Als u uw meting wilt overdragen, raadpleegt u de paragraaf "Uw meting overdragen".

Uw meting overdragen

Open de app op uw smart device.

1. Automatisch overdragen

Uw meting wordt automatisch binnen 30 minuten na uitschakeling van de weegschaal overgedragen naar uw smart device.


Opmerking

- Als uw meting wordt overgedragen voordat de weegschaal is uitgeschakeld, wordt het symbool "⌘" weergegeven op het display tijdens de overdracht.



2. Handmatig overdragen

Als u de meting handmatig wilt overdragen, drukt u op de knop [Bluetooth] terwijl het apparaat is uitgeschakeld. Het symbool "⌘" wordt van het begin tot het einde van de overdracht weergegeven.

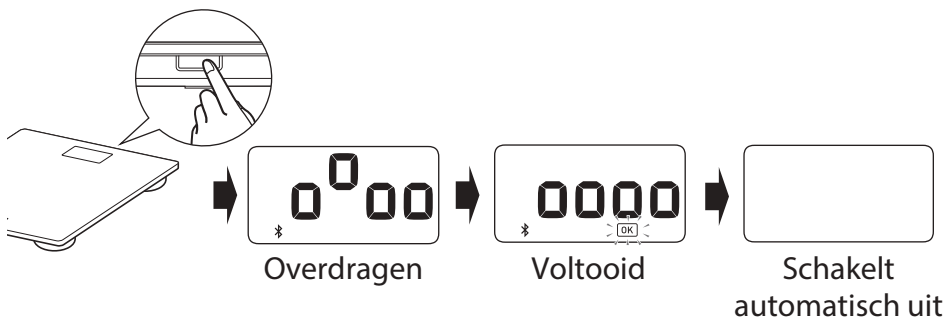

De weegschaal schakelt 10 seconden na voltooiing van de overdracht automatisch uit.

Opmerking

- Als het symbool "⌘" niet wordt weergegeven, raadpleegt u voor meer informatie "De gegevens worden niet overgedragen." in de paragraaf "Foutmeldingen en problemen oplossen".
- U kunt maximaal 30 metingen opslaan op deze weegschaal. Opgeslagen metingen kunnen niet op het display van de weegschaal worden weergegeven. U kunt uw metingen in de app bekijken nadat deze zijn overgedragen.
- Wanneer het symbool "⌘" op het display wordt weergegeven, is uw meting niet overgedragen. Draag de metingen over voordat de oudste meting wordt verwijderd.

Gewichtsvoortgang van meerdere gebruikers traceren

Als meerdere gebruikers de weegschaal gebruiken, adviseren we het gebruik van de app-functie Autofilter waarmee u uw resultaten kunt volgen en waarmee uitsluitend uw eigen gewichtsgegevens worden weergegeven op uw smart device. 2 gebruikers kunnen hun gewichtsgegevens volgen op verschillende smart devices.

1 Download en installeer de app OMRON connect op uw smart device. Raadpleeg “3. De weegschaal koppelen met een smart device”.

U kunt 2 smart devices verbinden met uw weegschaal.

2 Open de app en registreer uw weegschaal.

3 Stel de functie Autofilter in.

- a. Wanneer u zich de eerste keer weegt, wordt het scherm voor registratiebevestiging weergegeven.
- b. Bevestig dat de weergegeven waarde uw gewicht is en registreer het.

Bij de volgende synchronisatie worden de nieuwe gewichtsgegevens afgezet tegen de laatste gewichtswaarde in de app en uitsluitend uw eigen gegevens* worden weergegeven in de app op uw smart device.

* Als uw gewicht een grote gelijkens vertoont met dat van een andere gebruiker, kan het zijn dat het gewicht van die andere gebruiker wordt weergegeven. In dat geval kunt u de waarde in de app verwijderen.


De standaardinstellingen herstellen

Volg de instructies hieronder om de standaardinstellingen van de weegschaal te herstellen. Door deze handeling worden alle metingen en de in het geheugen opgeslagen koppelingsinformatie verwijderd.

Zorg ervoor dat de weegschaal is uitgeschakeld.


1 Houd de knop [Bluetooth] langer dan 2 seconden ingedrukt.

Het display knippert zoals rechts wordt weergegeven.

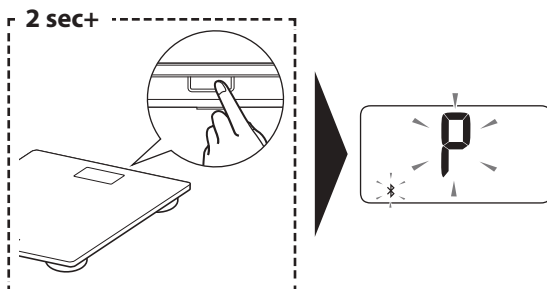

2 Houd de knop [Bluetooth] opnieuw langer dan 5 seconden ingedrukt.

Het display knippert zoals rechts wordt weergegeven en het symbool "❌" stopt met knipperen.

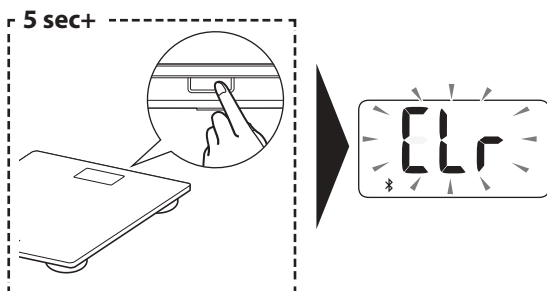


3 Druk op de knop [SET].

Wanneer het display stopt met knipperen, zijn alle instellingen volledig hersteld.





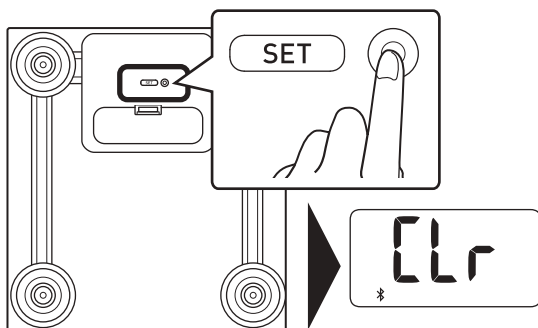




Opmerking

- De weegschaal schakelt na 10 seconden automatisch uit.
- Deze handeling verwijdert de gegevens in de app niet.



Foutmeldingen en problemen oplossen

Indien tijdens een meting een van de onderstaande problemen optreedt, controleer dan eerst of er geen ander elektrisch apparaat aanwezig is binnen een bereik van 30 cm. Als het probleem aanhoudt, raadpleeg dan de tabel hieronder.

Display/probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
 verschijnt	De weegschaal kan geen verbinding maken met een smart device of kan gegevens niet correct overdragen.	Volg de instructies in de app. Als "Err" nog steeds wordt weergegeven nadat u de app hebt gecontroleerd, neemt u contact op met uw OMRON-winkel of -distributeur.
 verschijnt	U hebt bewogen tijdens een meting.	Stap van de weegschaal af en deze zal na 10 seconden automatisch uitschakelen. Voer vervolgens opnieuw een meting uit.
	U hebt een meting uitgevoerd in een ruimte waarin sterke magnetische velden actief zijn.	Voer de meting uit in een andere ruimte.
 verschijnt	Er is een apparaatfout opgetreden.	Raadpleeg uw OMRON-winkel of -distributeur.
 verschijnt	Uw lichaamsgewicht valt buiten het meetbare bereik.	
 verschijnt	Afwijking tijdens automatische kalibratie.	Voer opnieuw een meting uit.
 verschijnt	Uw meting is niet overgedragen.	Draag uw metingen over naar de app. Raadpleeg de paragraaf "Uw meting overdragen" voor meer informatie. Dit symbool wordt weergegeven nadat uw metingen succesvol zijn overgedragen.
 knippert	Het batterijvermogen is laag.	Er wordt aanbevolen om alle batterijen te vervangen door nieuwe. Raadpleeg paragraaf "1. Batterijen plaatsen".
 ,  verschijnt	Batterijen zijn leeg.	Vervang alle batterijen onmiddellijk door nieuwe. Raadpleeg paragraaf "1. Batterijen plaatsen".
	Batterijpolen zijn niet in de juiste richting geplaatst.	Controleer of de batterij correct is geplaatst. Raadpleeg paragraaf "1. Batterijen plaatsen".
	Het gewicht van de gebruiker is lager dan 10 kg.	Voor de weegschaal is een gewicht van 10 kg of hoger nodig om automatisch in te schakelen. Als de gebruiker minder dan 10 kg weegt, schakel de weegschaal dan in door er een voorwerp op te zetten dat 10 kg of meer weegt en voer dan de meting uit.
De gegevens worden niet overgedragen.	Verbindingsfout.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of er geen interferentiebronnen in de buurt zijn. Plaats het ontvangende apparaat op minder dan 5 m van de weegschaal. Als het probleem zich blijft voordoen, raadpleeg dan "Help" in de app "OMRON connect" voor verdere hulp.
De meetwaarden zijn hoger of lager dan het werkelijke resultaat. Uw waarden zijn voor elke meting heel anders.	U voert een meting uit op een kleeft, zacht vloeroppervlak of op een oneffen vloer.	Zorg ervoor dat de weegschaal correct is geplaatst op een harde, vlakke en effen vloer.
	De weegschaal heeft geen correcte automatische kalibratie uitgevoerd.	Kalibreer uw weegschaal. Raadpleeg de paragraaf "Kalibratie".

Onderhoud

Onderhoud

Neem de onderstaande aanwijzingen in acht om beschadiging van uw weegschaal te voorkomen:


- Gebruik een zachte, droge doek of een zachte doek die is bevochtigd met een mild (neutraal) reinigingsmiddel om de weegschaal te reinigen.
- Gebruik een zachte doek die is bevochtigd met ontsmettingsalcohol om de plaat te reinigen.
- Bewaar de weegschaal op een schone, veilige plaats.
- Gebruik geen schurende of vluchtige reinigingsmiddelen, benzine, verdunner of vergelijkbare oplosmiddelen om de weegschaal te reinigen.
- Reinig de weegschaal niet door deze onder te dompelen in water.

Correcte opslag


De weegschaal kalibreert automatisch opnieuw wanneer deze niet in gebruik is. Als de automatische kalibratie niet lukt, raadpleegt u de paragraaf "Kalibratie" voor instructies over de handmatige kalibratie van uw weegschaal. Automatische kalibratie zal beter worden uitgevoerd als u uw weegschaal niet als volgt opslaat:



De weegschaal leunt tegen de muur of tegen andere voorwerpen

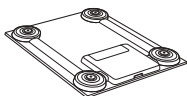

De weegschaal is op de kop geplaatst

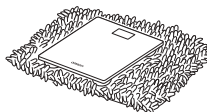

De weegschaal is op een tapijt of mat geplaatst



Er zijn voorwerpen op de weegschaal geplaatst

Kalibratie

Volg de instructies hieronder om uw weegschaal te kalibreren.

1 Plaats de weegschaal op een harde, vlakke en effen vloer.

2 Druk met uw hand op het oppervlak van de weegschaal om deze in te schakelen.

Haal vervolgens meteen uw hand van de weegschaal.

3 Wanneer "0,0 kg" (of "0,0 lb", "0,0 st") wordt weergegeven, wacht dan 1 minuut voordat u de weegschaal uitschakelt.

Vervolgens kunt u een meting uitvoeren.

Specificaties

Productbeschrijving	Smart weegschaal
Model (nummer)	HN300T2 Intelli IT (HN-300T2-EBK / HN-300T2-EGY)
Display	5 tot 150 kg in stappen van 0,1 kg (11 tot 330 lb in stappen van 0,2 lb) (0 st 11 lb tot 23 st 8 lb in stappen van 0,2 lb)
Nauwkeurigheid	5 tot 150 kg $\pm(1\%+0,1 \text{ kg})$ (11 tot 330 lb $\pm(1\%+0,2 \text{ lb})$) (0 st 11 lb tot 23 st 8 lb $\pm(1\%+0,2 \text{ lb})$)
Overdrachtsmethode	Bluetooth® lage energie
Draadloze communicatie	Frequentiebereik: 2,4 GHz (2400 - 2483,5 MHz) Modulatie: GFSK Effectief uitgestraald vermogen: <20 dBm
Voeding	4 "AAA" batterijen
Levensduur batterijen	Ongeveer 3 maanden: bij gebruik van mangaanbatterijen Ongeveer 6 maanden: bij gebruik van alkalinebatterijen (bij gebruik in 2 metingen, 2 gegevensoverdrachten per dag, bij een kamertemperatuur van 23 °C)
Bedrijfsomstandigheden	+5 tot +40 °C, 30 tot 85 % RV (zonder condensvorming), 860 tot 1.060 hPa
Opslagomstandigheden	-20 tot +60 °C, 10 tot 95 % RV (zonder condensvorming)
Gewicht	Circa 1,5 kg inclusief batterijen
Buitenafmetingen	Ongeveer 270 (B) × 26,4 (H) × 290 (D) mm
Inhoud	Digitale weegschaal, 4 "AAA" mangaanbatterijen, gebruiksaanwijzing, app-gebruiksaanwijzing, bewijs van beperkte garantie

Opmerking

- Deze specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- De productiedatum van het product is afgedrukt op het apparaat: de eerste 4 cijfers vormen het productiejaar, de volgende 2 cijfers de maand van productie en de daaropvolgende 2 cijfers de dag van productie.

Info over verstoring van de draadloze communicatie

U kunt de Bluetooth-optie van het product gebruiken om verbinding te maken met speciale apps op mobiele apparaten voor de synchronisatie van datum/tijdgegevens van het mobiele apparaat naar het product en voor de synchronisatie van meetgegevens van het product naar het mobiele apparaat. De verdere verwerking van de gegevens op het mobiele apparaat is aan de gebruiker. Dit product maakt gebruik van de niet-gelicenseerde ISM-band op 2,4 GHz waar derden de radiogolven opzettelijk of per ongeluk kunnen onderscheppen, om welke reden dan ook. Indien dit product wordt gebruikt in de buurt van draadloze apparaten, zoals een magnetron of een draadloos LAN, die gebruikmaken van dezelfde frequentie als dit product, bestaat er een kans dat er interferentie optreedt. Als er interferentie optreedt, stop dan met het gebruik van de andere apparaten of plaats dit product uit de buurt van andere draadloze apparaten voordat u het opnieuw probeert te gebruiken.

Correcte verwijdering van dit product (elektrische en elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden aan het einde van de gebruiksduur.

Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde verwijdering van afval te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Thuisgebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te informeren waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product mag bij verwijdering niet worden gemengd met ander bedrijfsafval.



Begeleiding en verklaring van de fabrikant

- Hierbij verklaart OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. dat de radioapparatuur van type HN-300T2-EBK en HN-300T2-EGY voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU.
- De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.omron-healthcare.com
- Dit OMRON-product is vervaardigd conform het strenge kwaliteitssysteem van OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japan.



Apple en het logo van Apple zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de V.S. en in andere landen en regio's. App Store is een service van Apple Inc.

Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.

Het woordmerk en de logo's van **Bluetooth**® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en enig gebruik hiervan door OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. geschiedt onder licentie. Overige handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaren.

Fabrikant	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN	
Vertegenwoordiging in de EU	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NEDERLAND www.omron-healthcare.com	
Productiefaciliteit	KRELL PRECISION (YANGZHOU) CO., LTD. No. 28, Xingyang Road, Economic Development Zone, Yangzhou, Jiangsu 225009, China	
Dochter-ondernemingen	Importeur in het Verenigd Koninkrijk	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors
	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH / OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors	

<https://www.omron-healthcare.com/>